



Indice

1.	Introduzione	4
1.1.	Identificazione.....	4
1.2.	Condizioni di garanzia.....	4
1.3.	Utilizzo conforme alla destinazione d'uso	5
1.4.	Fornitura	5
1.4.1.	Accessori opzionali	6
1.5.	Componenti	6
1.5.1.	Applicatore	6
1.5.2.	Terminale con cavo di collegamento.....	6
1.5.3.	Cavo di collegamento (Splitter)	7
1.5.4.	Alimentatore (optional).....	7
2.	Avvertenze di sicurezza generali	8
2.1.	Pericoli per le persone	8
2.1.1	Controindicazioni	8
2.2.	Possibili danni materiali	9
2.3.	Elementi tipografici.....	9
2.4.	Spiegazione dei simboli.....	9
3.	Istruzioni per l'uso	10
3.1.	Descrizione del sistema iLifeFIR.....	10
3.2.	Messa in funzione.....	11
3.2.1.	Preparazione della messa in funzione - Start	11
3.2.1.	iLifeFIR con esercizio singolo	11
3.2.1.2	iLifeFIR con esercizio combinato con l'iLifeSOMM	11
3.2.2.	Configurazione principale del menu utente	12
3.2.3.	Accensione dell'apparecchio	13
3.2.4.	Impostazione del programma desiderato	13
3.3.	Avvertenze sull'applicazione	14
3.3.1	Scelta della temperatura corretta.....	15
3.3.2	Scelta della corretta durata dell'applicazione	15
3.3.3	Applicazione senza elettrosmog.....	15
4.	Cura e manutenzione	16
4.1.	Alimentatore di comando iLifeFIR.....	16
4.1.1.	Conversione dell'unità di misura della temperatura °C / °F.....	16
4.2.	Applicatore iLifeFIR.....	16
5.	Ricerca errori	17
6.	Dati tecnici	18
7.	Dichiarazione di conformità CE	19

1. Introduzione

Si prega di leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso in ogni caso prima della prima messa in funzione dell'apparecchio. Le istruzioni contengono importanti avvertenze in merito alla sicurezza, uso e manutenzione del sistema.

1.1. Identificazione

Il sistema iLifeFIR è un sistema Wellness e può applicazione essere applicato sulle persone. Il sistema iLifeFIR è previsto per applicazioni a infrarossi a distanza. Ogni apparecchio è dotato di un proprio numero di serie.

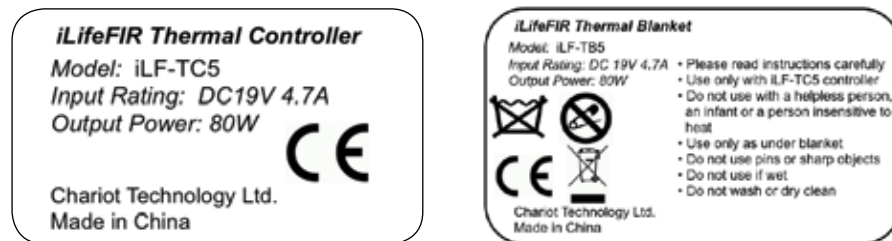


Figura 1: marcatura del terminale di comando (sinistra) e dell'applicatore (destra)

1.2. Condizioni di garanzia

Il produttore garantisce in caso di corretto utilizzo conformemente alle disposizioni di legge, dal giorno della consegna in poi. Durante questo periodo l'apparecchio viene sostituito o riparato gratuitamente dal produttore o dal servizio assistenza centrale o in loco iLife autorizzato. Parti/ apparecchi difettosi devono essere consegnati franco fabbrica. Per eventuali dispute il foro competente relativamente a mancanze del produttore è esclusivamente quello della sede del produttore. Gli accessori sono coperti da garanzia conformemente alle disposizioni di legge.

Il produttore raccomanda la „Garanzia iLife Plus” per il prolungamento della garanzia.

Le istruzioni per l'uso devono essere lette, comprese e seguite dall'utente dell'apparecchio. Si esclude dalla responsabilità per vizi quanto segue:

- la mancata osservanza delle istruzioni per l'uso,
- utilizzo errato o approssimativo,
- danneggiamento intenzionale.

La garanzia non è valida nel caso in cui l'ordinante o terzi effettuino interventi sull'apparecchio senza previa autorizzazione scritta da parte del produttore.

Attenzione!

L'apparecchio e gli applicatori non devono essere aperti in nessun caso, altrimenti viene meno il diritto alla garanzia.

Modifiche tecniche

Si riservano modifiche tecniche necessarie al miglioramento dell'apparecchio/accessori, rispetto alle immagini e ai dati delle presenti istruzioni d'uso.

Diritti d'autore

La copia o riproduzione delle presenti istruzioni d'uso, completa o parziale, deve avvenire previa autorizzazione da parte il fabbricante.

1.3. Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

Il sistema iLifeSOMM deve essere utilizzato per il rilassamento, il benessere ed il miglioramento della sensazione di benessere delle persone.

Il produttore non garantisce per tutte le applicazioni non comprese nell'utilizzo conforme alla destinazione d'uso.


L'applicatore iLifeFIR iLF-TB5 deve essere utilizzato solo unitamente al terminale di comando iLF-TC5 incluso nella fornitura, all'alimentatore e al cavo di rete specifico per il relativo paese.


1.4. Fornitura

Subito dopo aver ricevuto l'apparecchio, controllare che tutti i componenti di seguito elencati siano presenti:

- iLifeFIR applicatori iLF-TB5
- iLifeFIR terminale iLF-TC5
- iLifeFIR cavo di collegamento (Splitter)
- iLifeFIR istruzioni d'uso

ATTENZIONE!

 L'alimentatore iLifeFIR deve essere ordinato a parte se si intende utilizzare l'iLifeFIR con esercizio singolo.

 Nell'esercizio combinato con l'iLifeSOMM, l'iLifeFIR viene azionato tramite l'alimentatore dell'iLifeSOMM con cavo di collegamento.

1.4.1. Accessori opzionali

Per un rilassamento ottimale e applicazioni Wellness consigliamo il sistema iLifeSOMM. Questo può essere acquistato tramite i partner della distribuzione della iLife International Est. Per facilitare il trasporto è disponibile una borsa.

1.5. Componenti

Il sistema iLifeFIR è costituito dai seguenti componenti:

1.5.1. Applicatore



Figura 2: iLifeFIR Applicatore

Il corpo è progettato per uso normale (persona distesa). È calpestabile ma non ideato per carichi provocati da tacchi appuntiti, utilizzo come materassino. Il corpo deve essere posizionato su una superficie stabile (ubicato lungo iLifeSOMM).

1.5.2. Terminale con cavo di collegamento

Il terminale di comando serve per comandare tutte le funzioni del sistema iLifeFIR. Viene azionato tramite 5 tasti.

Il terminale di comando è collegato all'applicatore. Il collegamento non può essere separato e non si può sostituire il cavo con un altro cavo; diversamente non è possibile garantire il funzionamento corretto dell'apparecchio.



Figura 3: Terminale

1.5.3. Cavo di collegamento (Splitter)

Il cavo di collegamento (splitter) serve per l'alimentazione elettrica con esercizio combinato di iLifeSOMM e iLifeFIR tramite l'alimentatore del sistema iLifeSOMM.



Figura 4: Cavo di collegamento (Splitter)

1.5.4. Alimentatore (optional)

L'alimentatore non è incluso nella fornitura. È indispensabile quando l'iLifeFIR deve funzionare come sistema singolo.

Non si possono usare altri alimentatori; diversamente non è possibile garantire il funzionamento corretto dell'apparecchio.

L'alimentatore può essere azionato a 100–240 V AC/ 50–60 Hz ed è disponibile con diversi connettori a spina (UE, CH).



Figura 5: Alimentatore esterna

2. Avvertenze di sicurezza generali

Il produttore garantisce il funzionamento corretto, sicuro e affidabile dell'apparecchio se vengono soddisfatti i seguenti requisiti:

- Uso dell'apparecchio soltanto in conformità alle istruzioni per l'uso
- Esecuzione di adattamenti, modifiche o riparazioni del sistema soltanto da parte il produttore o di persone da essa autorizzate.
- Il sistema può essere utilizzato soltanto con accessori e parti di ricambio, elencati nelle istruzioni per l'uso la cui idoneità d'impiego riguardo alla tecnica di sicurezza è accertata dal produttore.

2.1. Pericoli per le persone

- Non posizionare l'apparecchio in un ambiente umido o bagnato.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato:
 - se l'utente non ne garantisce il sicuro utilizzo a causa di un elevato consumo di alcol, droghe o medicinali,
 - in ambienti in cui si trovano gas facilmente infiammabili.
- L'applicazione sui bambini può avvenire solo sotto sorveglianza e se le impostazioni sul terminale di comando vengono effettuate da adulti.
- L'utilizzo da parte di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o psichiche, o mancata esperienza e mancate nozioni, può avvenire solo sotto sorveglianza oppure se queste persone hanno ricevuto dettagliate istruzioni sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio e sono consapevoli dei pericoli correlati.

Il sistema iLifeFIR **non** è un sistema medico e non deve essere impiegato per ragioni mediche.

2.1.1 Controindicazioni

- Gravidanza

Le applicazioni a infrarossi possono essere effettuate **solo sotto controllo medico**.

- Febbre alta e infiammazioni acute
- Gravi patologie cardiache e malattie venose
- Diabete mellito grave
- Insufficienza renale
- Coagulopatia e trombosi
- Crisi tireotossica (iperfunzionamento della tiroide che potrebbe risultare fatale)
- Anemia emolitica (anemia con diminuzione del numero dei globuli rossi)

2.2. Possibili danni materiali

- L'applicatore iLifeFIR deve essere posizionato su un sottofondo duro e non deve essere installato su letti regolabili. Prestare attenzione al fatto che l'applicatore e i cavi non vengano piegati e non si incastrino.
- Dopo l'utilizzo far raffreddare l'applicatore iLifeFIR per un paio di minuti prima di richiuderlo.
- Sopra l'applicatore riposto non si devono appoggiare altri oggetti che potrebbero comprimerlo con forza o danneggiarlo.
- Tenere lontani aghi o altri oggetti appuntiti.
- Non lavare né inserire l'applicatore iLifeFIR nell'asciugatrice (vedi punto 4.2)
- L'umidità relativa con condizioni di esercizio standard è pari al 30% - 75% a una temperatura di 30°C. L'apparecchio non è specificato per umidità relative diverse e in questi casi non è quindi possibile garantirne la funzionalità.
- Controllare a cadenza regolare l'eventuale presenza di danni all'apparecchio. Se vengono rilevati indizi in tal senso, prima di continuare a utilizzare l'apparecchio contattare il produttore o un centro di assistenza autorizzato.

2.3. Elementi tipografici

Operazioni richieste, come ad es.

1. Premere il pulsante Avvio, iniziare con un numero all'inizio della riga.



Questo simbolo indica utili informazioni supplementari o suggerimenti per facilitare l'utilizzo.

2.4. Spiegazione dei simboli



Questo simbolo mostra che l'apparecchio può essere utilizzato soltanto in ambienti chiusi.



Questo simbolo sta a significare che l'utente deve rispettare le istruzioni d'uso.



Mostra che l'apparecchio è stato sviluppato, progettato e realizzato in conformità alle direttive vigenti europee.

3. Istruzioni per l'uso

3.1. Descrizione del sistema iLifeFIR

Il sistema iLifeFIR è costituito da:

- 1 ... Applicatori iLifeFIR
- 2 ... Terminale iLifeFIR
- 3 ... Cavo di collegamento iLifeFIR (Splitter)
- 4 ... Alimentatore iLifeFIR (opzionale)
- 5 ... Alimentatore iLifeSOMM (esterno)

iLifeFIR viene comandato mediante il terminale. Con esso è possibile effettuare tutte le impostazioni per iLifeFIR

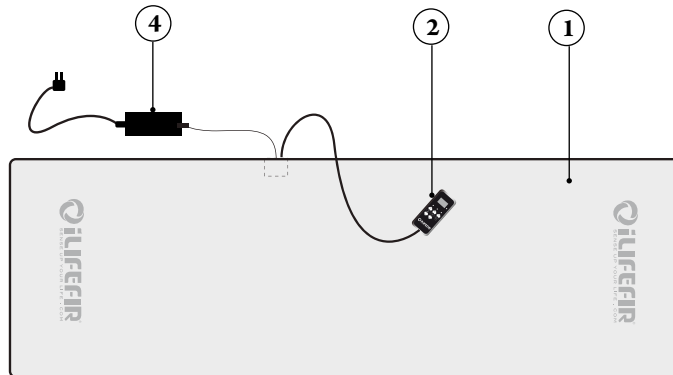


Figura 6:
iLifeFIR con
esercizio
singolo

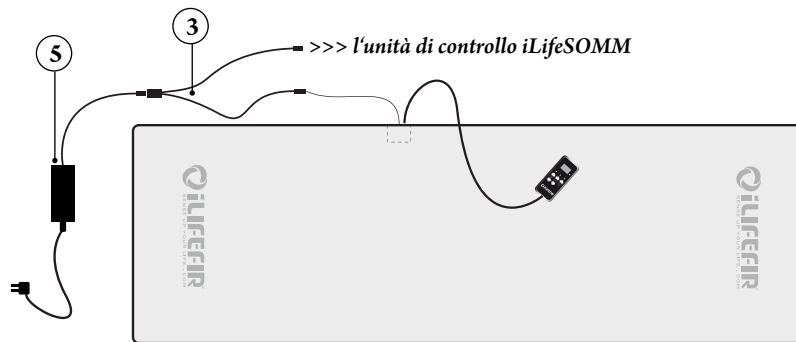


Figura 7: iLifeFIR con esercizio combinato con l'iLifeSOMM

3.2. Messa in funzione

3.2.1. Preparazione della messa in funzione - Start

Se l'apparecchio è stato esposto a temperature fredde, ad es. deposito in auto al di sotto di 10°C, dovrebbe essere lasciato per mezz'ora ad una temperatura ambiente tra 10°C e 30°C, prima di metterlo in funzione

Ci sono 2 possibilità per mettere in funzione il sistema iLifeFIR:

3.2.1.1 iLifeFIR con esercizio singolo

Rappresentazione schematica (vedi figura 6 a pagina 10)

1. Posizionare in piano l'applicatore iLifeFIR su un sottofondo¹⁾ solido
2. Collegare l'alimentatore al cavo dell'applicatore
3. Inserire nella presa elettrica il cavo di rete
4. Ora il sistema si avvia autonomamente e sul terminale di comando lampeggia in modo alternato la spia per la durata e la temperatura.

3.2.1.2 iLifeFIR con esercizio combinato con l'iLifeSOMM

Rappresentazione schematica (vedi figura 7 a pagina 10)

1. Posizionare in piano l'applicatore iLifeFIR sull'involucro dell'iLifeSOMM
2. Staccare il cavo di rete dell'iLifeSOMM dalla presa elettrica
3. Disattivare l'allacciamento elettrico dall'estremità inferiore del dispositivo di comando iLifeSOMM e collegare il cavo di collegamento iLifeFIR
4. Collegare l'elemento 1 del cavo di collegamento con il cavo dell'applicatore iLifeFIR
5. Collegare l'elemento 2 del cavo di collegamento con il dispositivo di comando dell'iLifeSOMM
6. Inserire nella presa elettrica il cavo di rete dell'iLifeSOMM
7. Ora il sistema si avvia autonomamente e sul terminale di comando lampeggia in modo alternato la spia per la durata e la temperatura.



Per l'esercizio combinato attenersi anche alle istruzioni per l'uso del sistema iLifeSOMM.

¹⁾ **Suggerimento:** Per una base solida utilizzare ad esempio un materasso duro.

3.2.2. Configurazione principale del menu utente

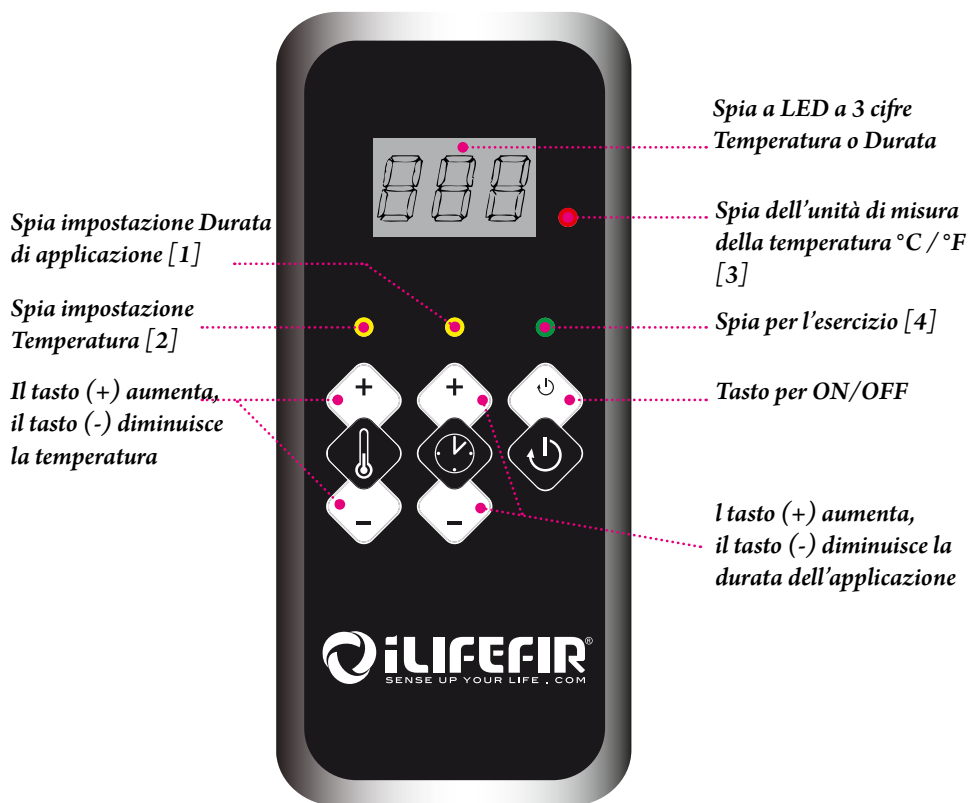


Figura 8: Struttura del terminale

LED	acceso	lampeggiante	spento
Spia impostazione Durata di applicazione [1]	● Impostazione durata applicazione attivata		○ Impostazione durata applicazione disattivata
Spia impostazione Temperatura [2]	● Impostazione temperatura attivata		○ Impostazione temperatura disattivata
Spia dell'unità di misura della temperatura [3]	● Impostazione su °F Fahrenheit		○ Impostazione su °C Celsius
Spia per l'esercizio [4]		● Applicazione in corso (ON)	○ OFF

Figura 9: Significato delle spie a LED

3.2.3. Accensione dell'apparecchio

- Dopo aver collegato l'alimentazione elettrica, sul display lampeggiano a fasi alternate la temperatura (37°C/99°F) e la durata dell'applicazione (24 min) preimpostate oppure l'ultima impostazione utilizzata.
- Premere una volta il tasto ON/OFF per avviare l'applicazione..
- Fino all'avvio definitivo del programma l'apparecchio si spegne automaticamente se il comando non viene azionato per più di 2 minuti. In questo caso si deve riattivare l'apparecchio premendo un tasto qualsiasi.

3.2.4. Impostazione del programma desiderato

Temperatura

Se il LED giallo al di sopra del simbolo della temperatura è acceso, il terminale di comando si trova nella modalità di impostazione "Temperatura" e il display visualizza la temperatura scelta in °C o °F.

La temperatura può essere impostata tra 29° e 45°C. Ogni volta che si preme il tasto (+) la temperatura aumenta di 4°C (29-33-37-41-45°). Premendo il tasto (-) diminuisce rispettivamente di 4°C (45-41-37-33-29°).

Durata dell'applicazione

Se il LED giallo al di sopra del simbolo dell'ora è acceso, il terminale di comando si trova nella modalità di impostazione "Durata dell'applicazione" e il display visualizza la durata scelta in minuti.

La durata dell'applicazione può essere impostata tra 4 e 48 minuti. Ogni volta che si preme il tasto (+) la durata aumenta di 4 minuti (4-8-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48 min). Premendo il tasto (-) diminuisce rispettivamente di 4 minuti (48-44-40- ...-12-8-4 min).

Start / Stop

Premere una volta il tasto ON/OFF per avviare l'applicazione. Il LED verde al di sopra del simbolo di start lampeggia a cadenza di un secondo.

L'applicazione continua per la durata scelta. In alto sul display è visibile la durata residua dell'applicazione. Una volta trascorso il tempo impostato il sistema si spegne automaticamente e il LED si spegne.

Nota: se si desidera terminare l'applicazione in anticipo premere nuovamente il tasto ON/OFF. Per spegnere del tutto l'apparecchio tenere premuto il tasto ON/OFF per 3 secondi.

3.3. Avvertenze sull'applicazione

Il sistema iLifeFIR è concepito per l'applicazione su tutto il corpo. Ci si stende vestiti con la schiena in piano sull'applicatore, la testa in alto vicino al logo "iLifeFIR" e il terminale di comando nella mano destra.

L'elemento FIR, per motivi legati alla produzione, non è sufficiente per tutta la superficie, bensì solo dall'alto fino all'inizio del logo inferiore "iLifeFIR" (vedi superficie tratteggiata).

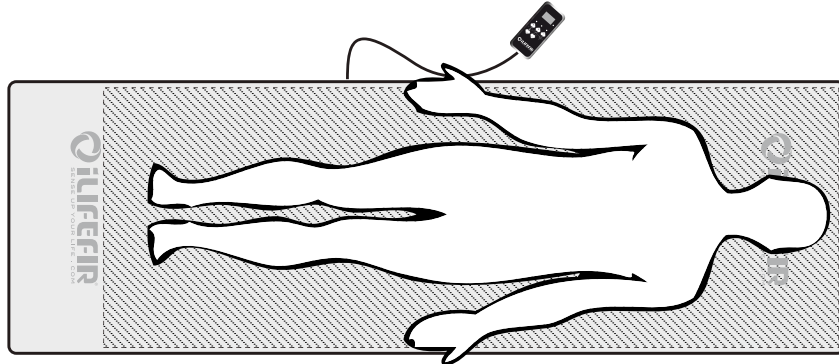


Figura 10: Posizione normale sull'iLifeFIR - Testa sull'estremità superiore

Le persone sensibili possono rivoltare l'applicatore in modo che la testa poggi al di fuori dell'area irradata da infrarossi a distanza. Nell'esercizio combinato con iLife-SOMM girare assolutamente l'applicatore e non stendersi semplicemente alla rovescia.

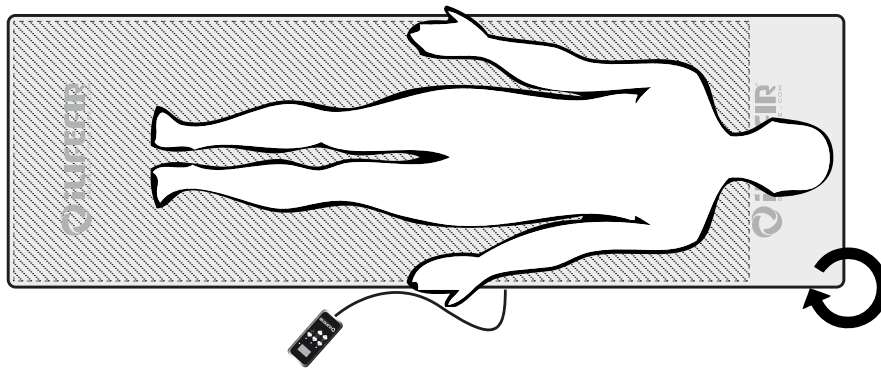


Figura 11: Posizione normale sull'iLifeFIR - Testa sull'estremità inferiore

I raggi a infrarossi a distanza penetrano nel corpo ad una profondità di circa 5-7 cm anche attraverso l'abbigliamento. Per un'ulteriore ottimizzazione è possibile stendersi in posizione prona ed effettuare un'altra applicazione.

3.3.1 Scelta della temperatura corretta

Tenere presente che potrebbero essere necessari fino a 3 minuti prima di avvertire il calore. La temperatura impostata viene misurata direttamente sull'elemento FIR. Questa temperatura potrebbe differire leggermente a causa di influssi esterni (ad esempio temperatura esterna).

Nelle prime settimane cominciare con temperature basse per abituarsi lentamente all'effetto e poi aumentare a piacimento.

Impostazione 29°/33°C (84°/91°F)

azione sedativa, tranquillizzante, rilassante, benefica, preventiva, ...

Impostazione 37°C (98°F)

azione bilanciante, riequilibrante, rilassante per la muscolatura, preventiva, ...

Impostazione 41°/45°C (105°/113°F)

azione tonificante, stimolante, disintossicante, preventiva, ...

3.3.2 Scelta della corretta durata dell'applicazione

La durata dell'applicazione può essere selezionata tra 4 e 48 minuti. Per la scelta della durata dell'applicazione deve essere messa in primo piano la sensibilità personale soggettiva

Suggeriamo di attenersi a una regola generale: quanto più intenso è il sintomo e quanto più persistente è il problema, tanto maggiore è la durata e minore la temperatura.

3.3.3 Applicazione senza elettrosmog

Il sistema iLifeFIR è dotato di una schermatura esclusiva che consente un'applicazione pressoché esente da elettrosmog. Per fare in modo che tale schermatura funzioni è assolutamente necessario allacciare il connettore a spina a una presa elettrica con collegamento a massa attivo.



In caso di dubbi far controllare da personale tecnico.

4. Cura e manutenzione

4.1. Alimentatore di comando iLifeFIR

L'apparecchio non necessita di particolare manutenzione. L'involucro può essere pulito con un panno asciutto o umido.


4.1.1. Conversione dell'unità di misura della temperatura °C / °F



Per cambiare la visualizzazione della temperatura da °Celsius (preimpostata) a °Fahrenheit tenere premuti contemporaneamente per 3 secondi i tasti (+) e (-) dell'impostazione della temperatura.

Le due spie a LED gialle sono accese contemporaneamente.

Il display indica ora la temperatura in °F (84–113°F) e lo segnala con la spia a LED rossa accesa vicina al display.

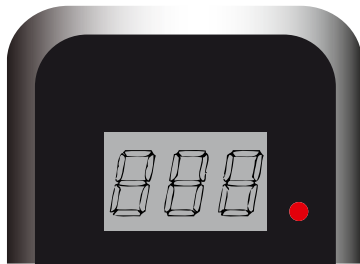

Tenere nuovamente premuti contemporaneamente per 3 secondi i tasti (+) e (-) dell'impostazione della temperatura, ripristinare di nuovo la visualizzazione su °Celsius. La spia a LED vicino al display si spegne.

Figura 12: Display con spia a LED per l'unità di misura della temperatura

4.2. Applicatore iLifeFIR

La superficie di appoggio è in pregiato tessuto Alcantara. La microfibra è in grado di catturare la polvere. La superficie può essere spazzolata con una spazzola morbida. Per questa operazione può essere utilizzata una spazzola per scarpe o per vestiti comunemente in commercio.

Rimuovere immediatamente eventuali macchie per non consentire che penetrino nel materiale. Per macchie provocate da liquidi utilizzare un panno molto assorbente e assorbire i liquidi in questione. Non sfregare ma tamponare. Infine sciacquare con acqua pulita. Non si possono utilizzare prodotti per la cura dei tessuti in pelle contenenti grassi o oli. Non utilizzare nemmeno solventi (ad esempio acetone) o detergenti con effetto abrasivo.

Attenzione: La superficie di appoggio non può essere lavata a secco!

L'eventuale penetrazione di acqua o di altri liquidi nel sistema iLifeFIR può provocare gravi guasti. Evitare quindi con cura qualsivoglia genere di penetrazione di liquido nel sistema iLifeFIR.

5. Ricerca errori

In caso di malfunzionamento, effettuare i seguenti controlli:

- I cavi sono tutti esternamente senza difetti e correttamente inseriti?
- L'alimentazione elettrica è corretta, la luce LED lampeggia nell'alimentatore esterno?
- Il terminale è collegato all cavo originale?

Se non si è in grado di risolvere il problema si prega di contattare il servizio di assistenza e riparazioni di seguito indicato.

Come già ricordato l'iLifeFIR non deve essere manipolato; diversamente decade qualsiasi garanzia e potrebbero verificarsi situazioni pericolose!

Guasto dell'apparecchio:

Il sistema iLifeSOMM è progettato senza necessità di manutenzione.

Produttore:

Chariot Technology Ltd
Kowloon, Hong Kong

Servizio assistenza riparazioni, distribuzione:

iLife International Est.
Föhrenweg 5
LI-9496 Balzers
Fürstentum Liechtenstein

Tel: +432 388 1100
hq@iLifeEurope.com
www.iLifeEurope.com

6. Dati tecnici

Denominazione modello::	Sistema iLifeFIR
Tensione nominale:	110 V AC – 230 V AC;
Frequenza nominale:	50 / 60 Hz
Assorbimento nominale:	max. 85W
Grado di protezione:	Classe I
	Far funzionare iLifeFIR soltanto con l'alimentatore speciale!
Tensione in uscita:	19 V DC
Durata applicazione:	a seconda del programma, 4 – 48 min
Range di temperatura:	29–45°C (84–113°F)
Dimensioni: :	
Lunghezza:	200 cm
Ampiezza::	65 cm
Altezza::	ca. 3 cm
Peso:	ca. 5 kg
Temperatura di esercizio:	+10°C a +30°C
Temperatura deposito:	0°C a +70°C
Umidità:	30% – 75% umidità relativa, che non condensa

Modifiche e sviluppo del prodotto riservati



7. Dichiarazione di conformità CE



Dongguan EMTEK Co., Ltd.
No 281, Quantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China
www.emtek.com.cn Tel:+86-769-2280 7079 Fax:+86-769-2280 7079

Certificate of Conformity

NO.: ED1303020055

The following product has been tested by us with the listed standards and found in conformity with the council LVD directive 2006/95/EC. It is possible to use CE marking to demonstrate the conformity with this LVD Directive.


Applicant	: CHARIOT TECHNOLOGY LIMITED
Address	: Room 1801, 18 th Floor, Two Grand Tower, 625 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong.
Manufacturer	: CHARIOT TECHNOLOGY LIMITED
Address	: Room 1801, 18 th Floor, Two Grand Tower, 625 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong.
Factory	: DAKA MANUFACTURING LTD.
Address	: Dali District, Qingxi Town, Dongguan City, Guangdong Province, China.
EUT	: iLife FIR Thermal Blanket
Trade Mark	: N/A
M/N	: iLF-TB3, iLF-TB5.
Technical Data	: DC19V, 80W, Class III.
Test Standards	: EN 60335-2-17:2002+A1:2006+A2:2009 in conjunction with EN 60335-1:2012

CE



(Manager)
April 22, 2013

The certificate is based on a single evaluation of one sample of above-mentioned products. It does not imply an assessment of the whole production and does not permit the use of the test lab. logo.



 Dongguan EMTEK Co., Ltd.
 No.281, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China
 www.emtek.com.cn Tel:+86-769-2286 7078 Fax:+86-769-2280 7078

Certificate of Conformity

NO.: ED130221037S

The following product has been tested by us with the listed standards and found in conformity with the council LVD directive 2006/95/EC. It is possible to use CE marking to demonstrate the conformity with this LVD Directive.

Applicant : CHARIOT TECHNOLOGY LIMITED
 Address : Room 1801, 18th Floor, Two Grand Tower, 625 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong.

Manufacturer : CHARIOT TECHNOLOGY LIMITED
 Address : Room 1801, 18th Floor, Two Grand Tower, 625 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong.

Factory : DAKA MANUFACTURING LTD.
 Address : Dali District, Qingxi Town, Dongguan City, Guangdong Province, China.



EUT : iLife FIR Thermal Blanket

Trade Mark : N/A

M/N : iLF-TB3, iLF-TB5.

Technical Data : Adaptor:
 Input: 100-240V~, 50-60Hz, 1.6A, Output: DC19V, 4.8A,
 Blanket: DC19V, 80W, Class III.

Test Standards : EN 60335-2-17:2002+A1:2006+A2:2009 in conjunction with
 EN 60335-1:2012



 (Manager)
 April 28, 2013

The certificate is based on a single evaluation of one sample of above-mentioned products. It does not imply an assessment of the whole production and does not permit the use of the test lab. logo.



 Dongguan EMTEK Co., Ltd.
 No.281, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China
 www.emtek.com.cn Tel:+86-769-2286 7078 Fax:+86-769-2280 7078

Certificate of Conformity

NO.: ED130221037E

The following products have been tested by us with the listed standards and found in conformity with the council EMC directive 2004/108/EC. It is possible to use CE marking to demonstrate the conformity with this EMC Directive.

Applicant : CHARIOT TECHNOLOGY LIMITED
 Address : Room 1801, 18th Floor, Two Grand Tower, 625 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong.

Manufacturer : CHARIOT TECHNOLOGY LIMITED
 Address : Room 1801, 18th Floor, Two Grand Tower, 625 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong.

EUT : iLife FIR Thermal Blanket

Trade Mark : NA


M/N : iLF-TB3, iLF-TB5.

Test Standards : EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
 EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
 EN 61000-3-3: 2008
 EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008



 (Manager)
 April 19, 2013

The certificate is based on a single evaluation of one sample of above-mentioned products. It does not imply an assessment of the whole production and does not permit the use of the test lab. logo.



No.281, Quential Road, Nanhai District, Dongguan, Guangdong, China
www.emtek.com.cn Tel:+86-769-2260 7076 Fax:+86-769-2260 7078

EMTEK
Access to the World

Certificate of Conformity

NO.: ED130221038S

The following product has been tested by us with the listed standards and found in conformity with the requirements.

Applicant : CHARIOT TECHNOLOGY LIMITED
Address : Room 1801, 18th Floor, Two Grand Tower, 625 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong.

Manufacturer : CHARIOT TECHNOLOGY LIMITED
Address : Room 1801, 18th Floor, Two Grand Tower, 625 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong.

Factory : DAKA MANUFACTURING LTD.
Address : Dali District, Qingxi Town, Dongguan City, Guangdong Province, China.


EUT : iLife FIR Thermal Blanket

Trade Mark : N/A

M/N : iLF-TB3, iLF-TB5.

Technical Data : Adaptor:
Input: 100-240V~, 50-60Hz, 1.6A, Output: DC19V, 4.8A.
Blanket: DC19V, 80W, Class III.

Test Standards : EN 62233:2008



(Manager)
April 28, 2013

The certificate is based on a single evaluation of one sample of above-mentioned products. It does not imply an assessment of the whole production and does not permit the use of the test lab. logo.



Produttore
Chariot Technology Ltd
Kowloon, Hong Kong

Version: 01 | 06.13

