



Vsebina

1.	Uvod.....	4
1.1.	Identifikacija izdelka.....	4
1.2.	Garancijska določila.....	4
1.3.	Ustrezna uporaba.....	5
1.4.	Vsebnost pošiljke.....	5
1.4.1.	Dodatna oprema.....	6
1.5.	Komponente.....	6
1.5.1.	Aplikator.....	6
1.5.2.	Upravljalna enota z povezovalni kabel.....	6
1.5.3.	Priključni kabel (razdelilni).....	7
1.5.4.	Omrežni adapter (opsijsko).....	7
2.	Splošna varnostna opozorila.....	8
2.1.	Nevarnosti za osebe.....	8
2.1.1.	Kontraindikacije (stranski učinki).....	8
2.2.	Morebitna materialna škoda.....	9
2.3.	Uporabljeni znaki.....	9
2.4.	Razlaga simbolov.....	9
3.	Navodilo za uporabo.....	10
3.1.	Opis sistema iLifeFIR.....	10
3.2.	Začetek obratovanja.....	11
3.2.1.	Priprava na zagon - Start.....	11
3.2.1.1.	Samostojna uporaba sistema iLifeFIR.....	11
3.2.1.2.	Uporaba sistema iLifeFIR v kombinaciji s sistemom iLifeSOMM.....	11
3.2.2.	Osnovna zgradba upravljalnega menija.....	12
3.2.3.	Vklop naprave.....	13
3.2.4.	Nastavitev zelenega programa.....	13
3.3.	Navodila za terapijo.....	14
3.3.1.	Izbira pravilne temperature.....	15
3.3.2.	Pravilna izbira trajanja terapije.....	15
3.3.3.	Terapija brez elektrosmoga.....	15
4.	Nega in vzdrževanje.....	16
4.1.	Upravljalna enota iLifeFIR.....	16
4.1.1.	Prilagajanje enote za temperaturo °C/°F.....	16
4.2.	Aplikator iLifeFIR.....	16
5.	Iskanje napak.....	17
6.	Tehnični podatki.....	18
7.	ES – izjava o skladnosti.....	19


1. Uvod

Pred prvim zagonom **nujno** natančno preberite navodila. Vsebujejo namreč pomembna opozorila o varnosti, uporabi in vzdrževanju sistema.

1.1. Identifikacija izdelka

Sistem iLifeFIR je wellness-sistem in je namenjen uporabi na ljudeh.

Sistem iLifeFIR je predviden za terapijo z infrardečim žarčenjem. Vsaka naprava je opremljena s svojo serijsko številko.

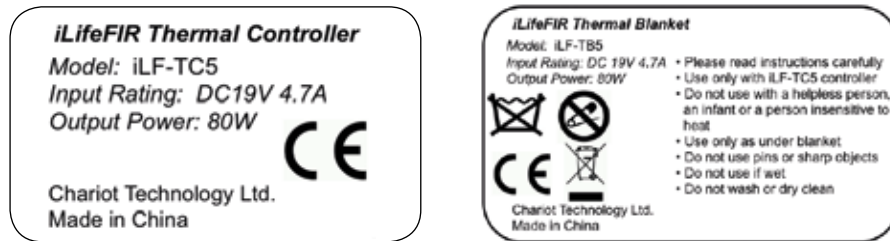

Slika 1: Oznaka upravljalne enote (levo) in aplikatorja (desno)

1.2. Garancijska določila

Proizvajalec daje garancijo od dneva dobave pri ustrezni uporabi v skladu z zakonskimi določili. V tem času proizvajalec ali s strani podjetja iLife pooblaščen servis napravo brezplačno zamenja ali popravi. Poškodovani deli/naprave se vrnejo brez poštnine. Morebitni spori in pristojnost v zvezi z napakami proizvajalca se obravnavajo izključno na sedežu podjetja, veljavno je pravo urad sedež proizvajalca. Za opremo velja garancija v skladu z zakonitimi določili.

Proizvajalec za podaljšanje garancije ponuja paket „iLife Plus garancija“.

Uporabnik mora navodila za uporabo prebrati, jih razumeti in upoštevati.

Garancija ne zajema:

- neupoštevanja navodil za uporabo,
- malomarne ali nepravilne uporabe,
- namerne poškodbe,

kot tudi obrabe in umazanijo.

Garancija postane neveljavna v primeru, če naročnik ali tretja oseba brez predhodnega pismenega dovoljenja proizvajalca na kakršenkoli način posega v napravo.

Pozor!

Naprave in aplikacij v nobenem primeru ne smete odpreti/razstaviti, sicer postanejo vse pravice iz garancije neveljavne.

Tehnične spremembe

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, pomembnih za izboljšavo naprave/opreme, brez predhodnega opozorila

Avtorske pravice

Ponatis ali kopiranje teh navodil za uporabo, v celoti ali delno, je dovoljeno samo z dovoljenjem proizvajalca.

1.3. Ustrezna uporaba

Sistem iLifeFIR je namenjen samo za sproščanje, wellness in izboljšanje počutja pri ljudeh. Za neustrezno uporabo proizvajalec ne daje garancije.

Aplikator sistema iLifeFIR iLF-TB5 uporabljajte samo v povezavi s priloženo upravljalno enoto iLF-TC5 in z omrežnim adapterjem, vključno z električnim kablom, ki je predpisan v določeni državi.

1.4. Vsebnost pošiljke

Takoj po prejemu naprave preverite, če pošiljka vsebuje vse spodaj naštet dele:

- iLifeFIR aplikator iLF-TB5
- iLifeFIR upravljalne enote iLF-TC5
- iLifeFIR priključni kabel (razdelilni)
- iLifeFIR navodila za uporabo

POMEMBNO!

Če nameravate sistem iLifeFIR **uporabljati samostojno**, je treba omrežni adapter iLifeFIR naročiti posebej.

V **kombinaciji** s sistemom iLifeSOMM se iLifeFIR uporablja prek omrežnega adapterja sistema iLifeSOMM s priključnim kablom.

1.4.1. Dodatna oprema

Za optimalno sprostitev in wellness terapijo priporočamo sistem **iLifeSOMM**. Tega je mogoče naročiti prek prodajnega partnerja iLife International Est. Na voljo je **torba** za preprosto prenašanje.

1.5. Komponente

Sistem iLifeFIR je sestavljen iz naslednjih komponent:

1.5.1. Aplikator



Slika 2: Aplikator sistema iLifeFIR

Glavni del je narejen za uporabo v ležečem položaju (oseba leži na blazini). Je trden, vendar ga ne postavljajte na ostro podlago, ne uporabljajte ga kot telovadno blazino ali v podobne namene. Glavni del mora biti postavljen na ravni, trdni podlagi.

1.5.2. Upravljalna enota z povezovalni kabel

Upravljalna enota je namenjena krmiljenju vseh funkcij sistema iLifeFIR. Upravlja se s petimi tipkami.

Upravljalna enota je trdno povezana z aplikatorjem. Povezave ne smete prekiniti in kabla zamenjati z drugim. V nasprotnem primeru pravilnega delovanja naprave ni mogoče zagotoviti.



Slika 3: Upravljalna enota

1.5.3. Priključni kabel (razdelilni)

Priključni kabel (razdelilni) je namenjen za električno napajanje pri skupni uporabi sistemov iLifeSOMM in iLifeFIR prek omrežnega adapterja sistema iLifeSOMM.



Slika 4: Priključni kabel (razdelilni)

1.5.4. Omrežni adapter (opcijsko)

Omrežni adapter ni vključen v vsebino dobave. Potreben je, kadar se sistem iLifeFIR uporablja kot samostojni sistem.

Uporaba drugih omrežnih adapterjev ni dovoljena. V nasprotnem primeru pravilnega delovanja naprave ni mogoče zagotoviti.

Omrežni adapter se lahko uporablja pri omrežni napetosti 100–240 V izmenične napetosti/50–60 Hz in je dobavljiv z različnimi električnimi vtiči (EU, CH).



Slika 5: Zunanji adapter

2. Splošna varnostna opozorila

Proizvajalec zagotavlja varno, zanesljivo in neoporečno delovanje naprave le v primeru, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

- Napravo uporabljajte samo v skladu z navodili za uporabo.
- Vse nastavitve, spremembe ali popravila sistema mora opraviti izključno proizvajalec ali z njegove strani pooblaščen osebe.
- Sistem se lahko uporablja samo z opremo in deli, ki so navedeni v navodilih za uporabo in katerih varnostno-tehnično in neoporečno delovanje je določil proizvajalec.

2.1. Nevarnosti za osebe

- Naprave ne izpostavljajte vlagi in mokroti.
- Naprave ne uporabljajte:
 - Kadar je zaradi uživanja alkohola, drog ali zdravil onemogočena varna uporaba naprave,
 - V prostorih, kjer so navzoči lahko-vnetljivi plini.
- Terapija pri otrocih se sme izvajati samo pod nadzorom odrasle osebe in tudi nastavitve na upravljalni enoti smejo izvajati le odrasle osebe.
- Terapija pri osebah z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebah, ki nimajo izkušenj in/ali znanja, se sme izvajati samo pod nadzorom, ali če so bile te obširno poučene o varnem ravnanju z napravo in seznanjene z nevarnostmi.

Sistem iLifeFIR NI medicinski pripomoček in se ne sme uporabljati v medicinske namene.

2.1.1 Kontraindikacije (stranski učinki)

Terapija z infrardečim žarčenjem je dovoljena samo pod **nadzorom zdravnika** v naslednjih primerih:

- Nosečnost
- pri visoki vročini in akutnih vnetjih,
- pri hudih srčnih in venskih obolenjih,
- pri hudi sladkorni bolezni,
- pri odpovedi ledvic,
- pri koagulopatiji (nagnjenosti h krvavitvam) in trombozi (krvnim strdkom),
- pri tireotoksični krizi (življenjsko ogrožajočega čezmernega delovanja ščitnice),
- pri hemolitični anemiji (slabokrvnosti z upadom števila rdečih krvničk).

2.2. Morebitna materialna škoda

- Aplikator iLifeFIR je treba postaviti na trdo podlago; ne nameščajte ga na nastavljive postelje. Pazite, da aplikator ali kabel ne bosta prepognjena ali ukleščena.
- Preden aplikator iLifeFIR po terapiji zložite, počakajte nekaj minut, da se ohladi.
- Med skladiščenjem na aplikator ne polagajte predmetov, ki bi ga lahko močno pritisnili ali poškodovali.
- Igle ali druge koničaste predmete držite proč od naprave.
- Aplikatorja iLifeFIR ne perite niti ga ne sušite v sušilniku (glejte točko 4.2)
- V običajnih pogojih uporabe znaša relativna vlažnost od 30 do 75 % pri temperaturi 30 °C.
Naprava ni specifičirana za druge vrednosti relativne vlažnosti zraka in v takih primerih pravilnost delovanja naprave ni zajamčena.
- Redno preverjajte, ali ni naprava poškodovana. Če opazite poškodbe, se pred nadaljnjo uporabo obrnite na proizvajalca ali pooblaščen servis.

2.3. Uporabljeni znaki

Konkretna navodila, kot npr.

1. Pritisnite tipko *Start*, se začnejo s številko na začetku vrstice.



S tem simbolom so označene uporabne dodatne informacije ali nasveti, ki omogočajo preprostejšo uporabo.

2.4. Razlaga simbolov



Simbol označuje, da se napravo uporabljati samo v zaprtih prostorih.



Simbol pomeni, da mora uporabnik natančno upoštevati navodila za uporabo.



Naprava razvita, konstruirana in izdelana v skladu z veljavnimi evropskimi določili.


3. Navodilo za uporabo

3.1. Opis sistema iLifeFIR


Sistem iLifeFIR je sestavljen iz:

- 1 ... iLifeFIR aplikatorja
- 2 ... iLifeFIR upravljalna enota
- 3 ... iLifeFIR Priključni kabel (razdelilni)
- 4 ... iLifeFIR Omrežni adapter (opcijsko)
- 5 ... iLifeSOMM Omrežni adapter (navzven)

Sistem iLifeFIR se upravlja s pomočjo upravljavca, s katerim se urejajo vse nastavitve na sistemu.

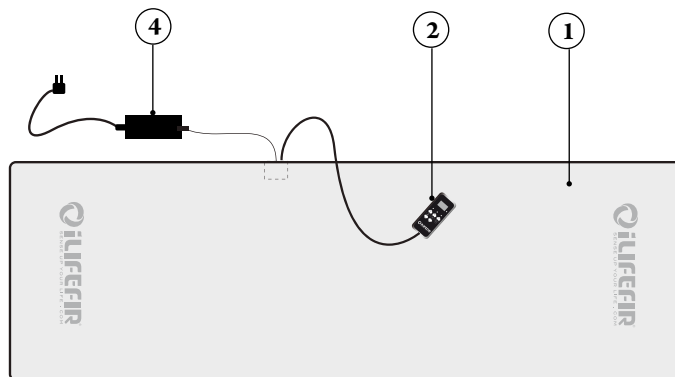

Slika 6:
Samostojna
uporaba
sistema
iLifeFIR

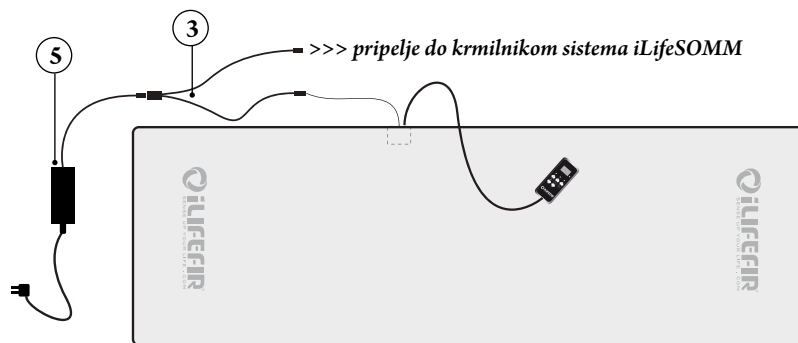

Slika 7: Uporaba sistema iLifeFIR v kombinaciji s sistemom iLifeSOMM

3.2. Začetek obratovanja

3.2.1. Priprava na zagon - Start

Kadar je bila naprava izpostavljena nizkim temperaturam, npr. v avtomobilu pri manj kot 10°C, jo morate pred uporabo približno pol ure pustiti na sobni temperaturi med 10°C ... 30°C.

Obstajata **dve možnosti**, kako je sistem iLifeFIR mogoče uporabljati:

3.2.1.1 Samostojna uporaba sistema iLifeFIR

Za shematični prikaz glejte sliko 6 na strani 10.

1. Položite aplikator iLifeFIR na trdno in ravno podlago ¹⁾.
2. Omrežni adapter povežite s kablom, ki izhaja iz aplikatorja.
3. Električni kabel priključite v vtičnico.
4. Sistem se samodejno zažene in na upravljalni enoti izmenično utripata prikaz za trajanje in temperaturo.

3.2.1.2 Uporaba sistema iLifeFIR v kombinaciji s sistemom iLifeSOMM

Za shematični prikaz glejte sliko 7 na strani 10.


1. Aplikator iLifeFIR ravno položite na ogrodje sistema iLifeSOMM.
2. Iz vtičnice izključite električni kabel sistema iLifeSOMM.
3. Izklopite električni priključek krmilnika sistema iLifeSOMM pri vznožju in ga povežite s priključnim kablom sistema iLifeFIR.
4. En konec priključnega kabla povežite s kablom, ki izhaja iz aplikatorja iLifeFIR.
5. Drugi konec priključnega kabla povežite s krmilnikom sistema iLifeSOMM.
6. Električni kabel sistema iLifeSOMM priključite v vtičnico.
7. Sistem se samodejno zažene in na upravljalni enoti izmenično utripata prikaz za trajanje in temperaturo.



Pri kombinirani uporabi upoštevajte tudi navodila za uporabo sistema iLifeSOMM.

¹⁾ **Nasvet:** Za trdno podlago lahko uporabite na primer trdo vzmetnico

3.2.2. Osnovna zgradba upravljalnega menija

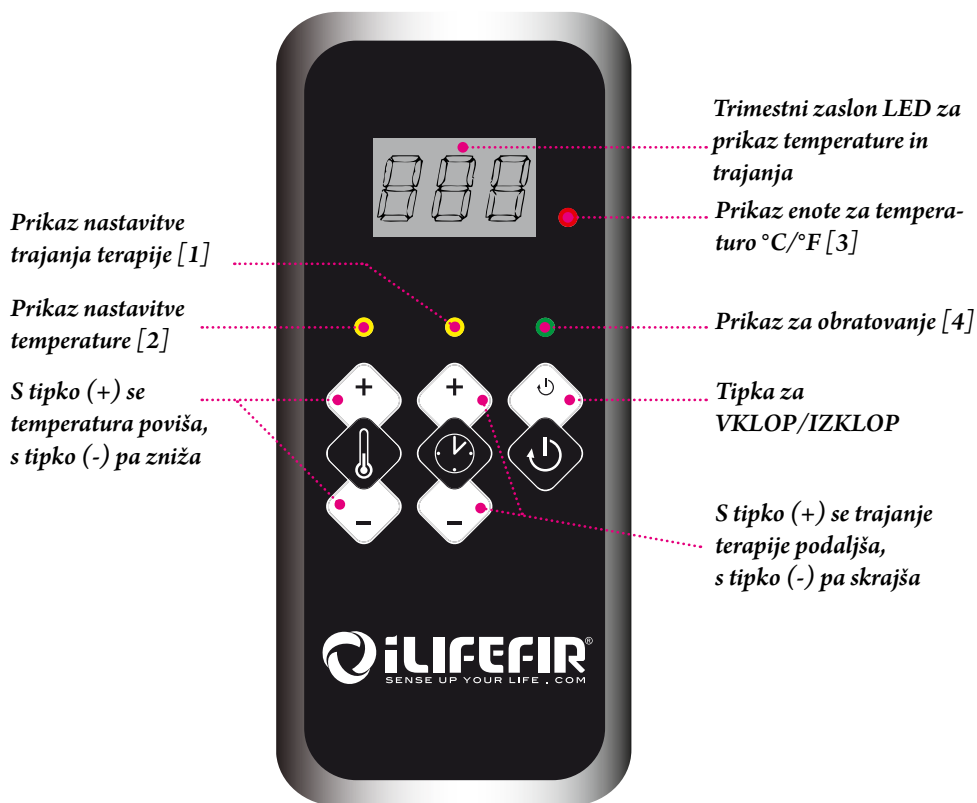

Slika 8: Osnovna zgradba upravljalnega menija

Lučka LED	sveti	utripa	izklopljena
Prikaz nastavitve trajanja terapije [1]	● Nastavitev trajanja terapije je aktivna		○ Nastavitev trajanja terapije ni aktivna
Prikaz nastavitve temperature [2]	● Nastavitev temperature je aktivna		○ Nastavitev temperature ni aktivna
Prikaz enote za temperaturo [3]	● Nastavitev na °F Fahrenheit		○ Nastavitev na °C Celzij
Prikaz za obratovanje [4]		● Terapija je v teku (VKLOP)	○ IZKLOP

Slika 9: Pomen prikazov LED

3.2.3. Vkllop naprave

- Po povezavi z dovodom električne energije na zaslonu izmenično utripata prednastavljeni vrednosti za temperaturo (37 °C/99 °F) in trajanje uporabe (24 min) ali nazadnje uporabljena nastavitvev.
- Pritisnite tipko za VKLOP/IZKLOP, da začnete terapijo.
- Do dokončnega zagona programa se naprava samodejno izklopi, če upravljanje ni aktivno več kot dve minuti. V tem primeru napravo znova aktivirate tako, da pritisnete poljubno tipko.

3.2.4. Nastavitev zelenega programa

Temperatura

Če nad simbolom za temperaturo utripa rumena lučka LED, je upravljalna enota v načinu za nastavljanje »temperature«, na zaslonu pa je prikazana izbrana temperatura v °C ali °F.

Temperaturo je mogoče nastaviti v obsegu od 29 do 45 °C. Z vsakim pritiskom tipke (+) se temperatura poviša za 4 °C (29–33–37–41–45°). Z vsakim pritiskom tipke (-) se ta zniža za 4 °C (45–41–37–33–29°).

Trajanje terapije

Če nad simbolom za čas sveti rumena lučka LED, je upravljalna enota v načinu za nastavljanje »trajanja terapije«, na zaslonu pa je prikazano izbrano trajanje v minutah.

Trajanje terapije je mogoče nastaviti v obsegu od 4 do 48 minut. Z vsakim pritiskom tipke (+) se trajanje podaljša za 4 minute (4–8–12–16–20–24–28–32–36–40–44–48 min). Z vsakim pritiskom tipke (-) se to skrajša za 4 min (48–44–40– ... –12–8–4 min).

Zagon/ustavitev

Enkrat pritisnete tipko za VKLOP/IZKLOP in terapija se začne. Zelena lučka LED nad simbolom za zagon zdaj utripa v sekundnem intervalu.


Terapija neprekinjeno traja za čas izbranega trajanja. Na zaslonu je viden preostali čas trajanja terapije. Po preteku časa se sistem samodejno izklopi, lučka LED pa preneha svetiti.

Opomba: Če želite terapijo predčasno prekiniti, znova pritisnete tipko za VKLOP/IZKLOP. Če želite napravo popolnoma izklopiti, pridržite pritisnjeno tipko za VKLOP/IZKLOP za tri sekunde.


3.3. Navodila za terapijo


Sistem iLifeFIR je zasnovan za terapijo celotnega telesa. Z oblačili vred se na hrbet ravno ulezite na aplikator, z glavo zgoraj pri logotipu »iLifeFIR«, z desno roko pri upravljalni enoti.

Proizvodno pogojeni infrardeči element se ne razteza po celotni površini, ampak samo od zgoraj do začetka spodnjega logotipa »iLifeFIR« (glejte osenčeno površino).

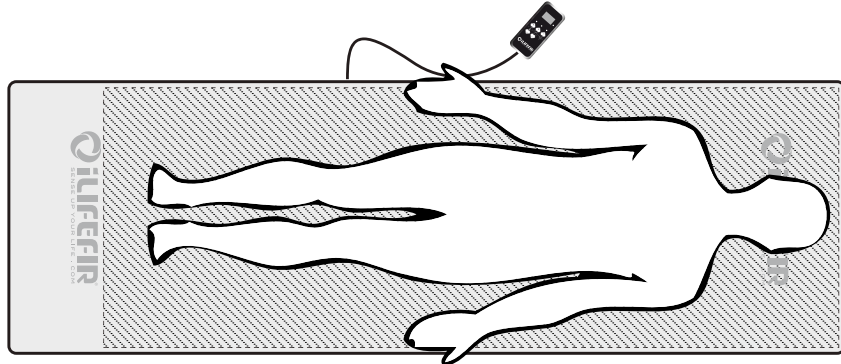


Slika 10: Običajen položaj na sistemu iLifeFIR – glava na zgornjem koncu

 Občutljive osebe lahko aplikator obrnejo, tako da je glava zunaj območja infrardečega žarčenja. Pri kombinirani uporabi sistema iLifeSOMM obvezno obrnite aplikator in se ne ulezite nanj tako, da se sami obrnete.

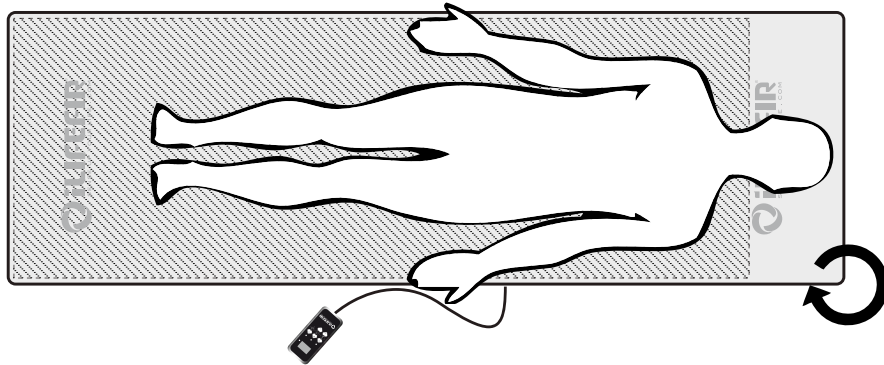

Slika 11: Obrnjeni položaj na sistemu iLifeFIR – glava na spodnjem koncu

 Infrardeče žarčenje prodira tudi skozi oblačila pribl. 5–7 cm globoko v telo. Za dodatno optimirano terapijo se lahko uležete tudi na trebuh in izvajate dodatno terapijo.

3.3.1 Izbira pravilne temperature

Upoštevajte, da lahko traja do tri minute, dokler ne začutite toplote. Nastavljena temperatura se meri neposredno na elementu infrardečega žarčenja. Temperatura lahko zaradi zunanjih vplivov (npr. zunanje temperature) nekoliko odstopa.

V prvih tednih začnite z nižjimi temperaturami, da se počasi navadite na učinek, nato pa jo po želji višajte.

Nastavitev 29°/33 °C (84°/91 °F)

pomirjevalno, sproščujoče, dobro počutje, preventiva ...

Nastavitev 37 °C (98 °F)


uravnovešenje, izravnavanje, za sproščanje mišic, preventiva ...

Nastavitev 41°/45°C (105°/113 °F)

krepcilno, stimulatивно, za razstrupljanje, preventiva ...

3.3.2 Pravilna izbira trajanja terapije

Trajanje terapije je mogoče izbrati v obsegu od 4 do 48 minut. Pri izbiri trajanja terapije je v ospredje postavljeno subjektivno osebno počutje.

 **Informativno** se lahko ravnate po teh pravilih. Močnejši ko je simptom in dalj ko trajajo težave, tem daljše je trajanje in tem nižja je temperatura.

3.3.3 Terapija brez elektrosmoga

Sistem iLifeFIR je opremljen z edinstveno zaščito, ki omogoča terapijo skoraj popolnoma brez elektrosmoga. Za delovanje zaščite je nujno potrebna priključitev električnega vtiča v vtičnico z aktivno ozemljeno povezavo.



Če niste prepričani, pustite, da to preveri strokovnjak.

4. Nega in vzdrževanje

4.1. Upravljalna enota iLifeFIR

Naprava ne potrebuje posebnega vzdrževanja. Ohišje lahko čistite s suho ali navlaženo krpo.


4.1.1. Prilagajanje enote za temperaturo °C/°F



Če želite prikaz temperature spremeniti s stopinje Celzija (prednastavitev) na stopinjo Fahrenheita, za nastavitev temperature za tri sekunde hkrati zadržite pritisnjeni tipki (+) in (-).

Hkrati svetita obe lučki LED.

Na zaslonu je prikazana temperatura v °F (84–113 °F), to pa označuje svetljenje rdeče lučke LED poleg zaslona.

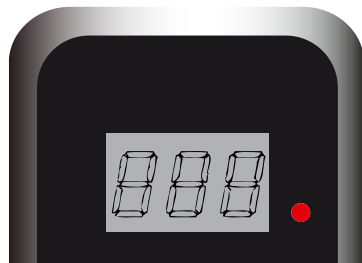

Znova za tri sekunde hkrati zadržite pritisnjeni tipki (+) in (-) nastavitve temperature in prikaz nastavite na °Celzija. Lučka poleg zaslona preneha svetiti.

Slika 12: Zaslona z lučko LED za enoto temperature

4.2. Aplikator iLifeFIR

Ležalna površina je iz visokokakovostnega materiala iz alcantare. Mikrovlakna imajo lastnost, da nase vežejo prah. Površino lahko skrtučite z mehko krtačo. Pri tem je lahko zelo koristna običajna krtača za čevlje ali oblačila.

Madeže odstranite čim prej, da se ne vpijejo v material. V primeru madežev od tekočin uporabite močno vpojno krpo in tekočino vpijte. Nikoli ne drgnite, ampak otirajte. Na koncu očistite s čisto vodo. Ne uporabljajte čistilnih sredstev za nego usnja z vsebnostjo maščob in olja. Prav tako ne uporabljajte topil (npr. acetona) ali grobih čistil.

Pozor: Ležalna površina ni obstojna proti kemičnemu čiščenju!

Vdor vode ali drugih tekočin v sistem iLifeFIR lahko povzroči hude okvare. Zato skrbno preprečite vsakršen vdor tekočin v sistem iLifeFIR.

5. Iskanje napak

Pri nepravilnem delovanju preverite naslednje:

- So vsi kabli neoporečni in pravilno priklopljeni?
- Ali električno omrežje deluje, je prižgana kontrolna LED lučka na zunanem adapterju?
- Je upravljevec priključen z originalnim povezovalnim kablom?

Če napake ne morete odpraviti, se obrnite na spodaj navedeni servisni center.

Kot je že prej omenjeno, na sistemu iLifeFIR ne smete izvajati nikakršnih posegov. V nasprotnem primeru garancija ne bo veljavna, pride pa lahko tudi do nevarnih situacij!!

Okvara na napravi:

Sistem iLifeFIR je konstruiran tako, da vzdrževanje ni potrebno.

Proizvajalca:

Chariot Technology Ltd
Kowloon, Hong Kong

**Servisna mesta,
Prodaja:**

iLife International Est.
Föhrenweg 5
9496 Balzers
Kneževina Liechtenstein
Tel: +432 388 1100
hq@iLifeEurope.com
www.iLifeEurope.com

6. Tehnični podatki

Naziv izdelka:	sistem iLifeFIR
Nazivna napetost:	110 V AC – 230 V AC;
Nazivna frekvenca:	50 / 60 Hz
Nazivna moč:	max. 85W
Zaščitni razred:	Razred I (s posebnim adapterjem) iLifeFIR lahko upravljajo samo s posebnim adapterjem!
Izhodna voltaža:	19 V DC
Trajanje uporabe:	odvisno od programa, 4 – 48 min.
Temperaturno območje:	29–45°C (84–113°F)

Dimenzije:

Dolžina:	200 cm
Širina:	65 cm
Višina:	ca. 3 cm
Teža:	ca. 5 kg

Uporabljajte pri temperaturi med:	+10°C in +30°C
Shranjujte pri temperaturi med:	0°C in +70°C
Vlaga:	30% – 75% rel. vlage, nekondenzirane

Pridržujemo si pravico do sprememb in nadaljnega razvoja proizvoda.



7. ES – izjava o skladnosti



Dongguan EMTEK Co., Ltd.
No 281, Quantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China
www.emtek.com.cn Tel:+86-769-2280 7079 Fax:+86-769-2280 7079

Certificate of Conformity

NO.: ED1303020055

The following product has been tested by us with the listed standards and found in conformity with the council LVD directive 2006/95/EC. It is possible to use CE marking to demonstrate the conformity with this LVD Directive.


Applicant	: CHARIOT TECHNOLOGY LIMITED
Address	: Room 1801, 18 th Floor, Two Grand Tower, 625 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong.
Manufacturer	: CHARIOT TECHNOLOGY LIMITED
Address	: Room 1801, 18 th Floor, Two Grand Tower, 625 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong.
Factory	: DAKA MANUFACTURING LTD.
Address	: Dali District, Qingsi Town, Dongguan City, Guangdong Province, China.
EUT	: iLife FIR Thermal Blanket
Trade Mark	: N/A
M/N	: iLF-TB3, iLF-TB5.
Technical Data	: DC19V, 80W, Class III.
Test Standards	: EN 60335-2-17:2002+A1:2006+A2:2009 in conjunction with EN 60335-1:2012

CE



(Manager)
April 22, 2013

The certificate is based on a single evaluation of one sample of above-mentioned products. It does not imply an assessment of the whole production and does not permit the use of the test lab. logo.



 Dongguan EMTEK Co., Ltd.
 No.281, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China
 www.emtek.com.cn Tel:+86-769-2286 7078 Fax:+86-769-2280 7078

Certificate of Conformity

NO.: ED130221037S

The following product has been tested by us with the listed standards and found in conformity with the council LVD directive 2006/95/EC. It is possible to use CE marking to demonstrate the conformity with this LVD Directive.

Applicant : CHARIOT TECHNOLOGY LIMITED
 Address : Room 1801, 18th Floor, Two Grand Tower, 625 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong.

Manufacturer : CHARIOT TECHNOLOGY LIMITED
 Address : Room 1801, 18th Floor, Two Grand Tower, 625 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong.

Factory : DAKA MANUFACTURING LTD.
 Address : Dali District, Qingxi Town, Dongguan City, Guangdong Province, China.



EUT : iLife FIR Thermal Blanket

Trade Mark : N/A

M/N : iLF-TB3, iLF-TB5.

Technical Data : Adaptor:
 Input: 100-240V~, 50-60Hz, 1.6A, Output: DC19V, 4.8A,
 Blanket: DC19V, 80W, Class III.

Test Standards : EN 60335-2-17:2002+A1:2006+A2:2009 in conjunction with
 EN 60335-1:2012



 (Manager)
 April 28, 2013

The certificate is based on a single evaluation of one sample of above-mentioned products. It does not imply an assessment of the whole production and does not permit the use of the test lab. logo.



 Dongguan EMTEK Co., Ltd.
 No.281, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China
 www.emtek.com.cn Tel:+86-769-2286 7078 Fax:+86-769-2280 7078

Certificate of Conformity

NO.: ED130221037E

The following products have been tested by us with the listed standards and found in conformity with the council EMC directive 2004/108/EC. It is possible to use CE marking to demonstrate the conformity with this EMC Directive.

Applicant : CHARIOT TECHNOLOGY LIMITED
 Address : Room 1801, 18th Floor, Two Grand Tower, 625 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong

Manufacturer : CHARIOT TECHNOLOGY LIMITED
 Address : Room 1801, 18th Floor, Two Grand Tower, 625 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong

EUT : iLife FIR Thermal Blanket

Trade Mark : NA

M/N : iLF-TB3, iLF-TB5

Test Standards : EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
 EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
 EN 61000-3-3: 2008
 EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008



 (Manager)
 April 19, 2013

The certificate is based on a single evaluation of one sample of above-mentioned products. It does not imply an assessment of the whole production and does not permit the use of the test lab. logo.

No.281, Quanzhi Road, Nanhai District, Dongguan, Guangdong, China
 www.emtek.com.cn Tel:+86-769-2260 7078 Fax:+86-769-2260 7078
 Dongguan EMTEK Co., Ltd. **EMTEK**
 Access to the World

Certificate of Conformity

NO.: ED130221038S

The following product has been tested by us with the listed standards and found in conformity with the requirements.

Applicant : CHARIOT TECHNOLOGY LIMITED
 Address : Room 1801, 18th Floor, Two Grand Tower, 625 Nathan Road,
 Kowloon, Hong Kong.

Manufacturer : CHARIOT TECHNOLOGY LIMITED
 Address : Room 1801, 18th Floor, Two Grand Tower, 625 Nathan Road,
 Kowloon, Hong Kong.

Factory : DAKA MANUFACTURING LTD.
 Address : Dali District, Qingxi Town, Dongguan City, Guangdong
 Province, China.

EUT : iLife FIR Thermal Blanket

Trade Mark : N/A

M/N : iLF-TB3, iLF-TB5.

Technical Data : Adaptor:
 Input: 100-240V~, 50-60Hz, 1.6A, Output: DC19V, 4.8A.
 Blanket: DC19V, 80W, Class III.

Test Standards : EN 62233:2008


 (Manager)
 April 28, 2013

The certificate is based on a single evaluation of one sample of above-mentioned products. It does not imply an assessment of the whole production and does not permit the use of the test lab. logo.



Proizvajalec
Chariot Technology Ltd
Kowloon, Hong Kong

Version: 01 | 06.13

